


RECHTE TRAPLIFT V120

Normale
prijs:

€ 3.390,00

**Speciale
prijs**

€ 2.390,00

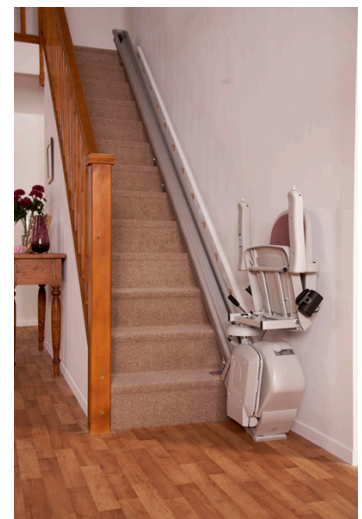



Short Description

- Zeer veilig en makkelijk in gebruik - Nieuwste lift van dit moment - Zeer veel nieuwe mogelijkheden - Uiterst compact in opgeklapte stand - Zeer snelle installatie mogelijk - Inclusief afstandbediening - Fluister stil **MEGA ACTIE: GRATIS MONTAGE EN 1 GRATIS SERVICE CONTRACT!**
OP=OP SLECHT 50 MODELLEN BESCHIKBAAR

Beschrijving

CareLife Trapliften B.V. is dé specialist in rechte trapliften, hierdoor kunnen wij u de beste prijs kwaliteit leveren voor dit type lift. Indien u een rechte trap heeft bent u bij ons aan het goede adres. Sinds vele jaren wordt deze traplift gefabriceerd en in duizenden huizen geïnstalleerd.



Voordelen van onze traplift:

- Onderhoudsvrije batterijen
- Makkelijk te bedienen door een joystick
- Digitaal beeldscherm
- Zachte start, zachte stop
- Vergrendelbare isolatie schakelaar
- Draaibare stoel
- Opvouwbaar stoel en voetensteun
- Infrarode afstandsbediening
- Veiligheid door sensoren
- Elektronische en mechanische remsystemen
- Bijna geruisloos in beweging
- Ontworpen voor makkelijke installatie



MAKKELIJK IN GEBRUIK

- Geruisloos in beweging door de aandrijving van gelijkstroom.
- Joystick en Infra rode afstandsbediening
- de lift kan worden gehaald en gezonden wanneer het nodig is. Een goede oplossing voor wanneer er twee gebruikers in huis zijn!
- 'Zachte start' en 'zachte stop' technologie
- geen plotselinge schok of slingerbewegingen wanneer de de lift start of stopt.
- Draaistoel met vergrendeling
- verzekert een gemakkelijke op- en afstap van de stoellift. Voor de veiligheid werkt de stoellift niet tenzij de stoel in de juiste positie is gezet.
- Digitaal beeldscherm, bevindt zich op het onderstel van de stoellift, dit toont duidelijk de normale positie aan en ook informatie in geval van een defect.
- Opklapbare Stoel & Voetensteun

- De trap blijft toegankelijk voor gebruik door anderen, door de zitting, armsteunen en voetensteun op te klappen wanneer het niet in gebruik is.



VEILIG IN GEBRUIK

- Drukgevoelige veiligheidspanelen die voorkomen dat de lift botst met eventuele obstakels op de trap. Deze bevinden zich rondom de voetensteun en op de boven- en onderkant van het onderstel.
- Limiet sensoren die ervoor zorgen dat de stoellift altijd in de correcte positie stopt.
- Elektronische en mechanische remsystemen
- elimineren de mogelijkheid op een ongecontroleerde afdaling.
- Vergrendelbare batterijschakelaar.
- Aangedreven door 24 Volt batterijen, geen kans op een elektrische schok.

[Klik hier voor onze uitgebreide brochure over onze rechte trapliften.](#) 

LEVERING De traplift wordt door onze eigen professionele installatie dienst gratis bij u geïnstalleerd in Nederland en België (andere landen in overleg). Letop! Elektro moet door klant zelf geregeld worden! Dit is een kleine aanpassing, overleg met de verkoper voor meer informatie hierover.

Extra informatie

Artikelcode	traplift_config
Type lift	RECHTE TRAP
Geschikt voor trap	Nee
Maximaal gebruikers gewicht	127 kg
Maximale helling	55 graden
Netstroom	220V, 50 Hz oplader
Accu's	24V DC (batterijen)
Afstandsbediening	inclusief 2 afstandsbedieningen
Motorkracht	0.25 KW
Rijmethode	Heugel en tandwiel
Veiligheidsriem	standaard
Opklapbaar	ja
Opties	Nee
Garantie	De garantietermijn is 12 maanden aan huis

Product Options

Trapkant:	Links
	Rechts

Additional Options

Breedte trap (mininum 65 cm):		€ 0,00
Trap is gemaakt van:	Hout	€ 0,00
	Ijzer	€ 0,00
	Marmer	€ 0,00
	Steen	€ 0,00
Opmerking bij bestelling:		€ 0,00