



CareLife

Trapliften



CareLife Zorgcomfort



CareLife
Trapliften

CareLife Trapliften B.V. is dé specialist in rechte trapliften. Wij kunnen u de beste prijs-kwaliteit leveren voor dit type lift. Indien u een rechte trap heeft, bent u bij ons aan het goede adres. Door deze specialisatie leveren wij geen trapliften voor een gebogen trap.

Veel mensen willen graag in hun eigen huis blijven wonen, maar gebrek aan mobiliteit kan het erg moeilijk maken de trap te beklimmen. Sinds vele jaren wordt de CareLife Traplift gefabriceerd en wereldwijd in duizenden huizen geïnstalleerd.

Deze veilige, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken traplift biedt oplossingen met betrekking tot mobiliteit en toegankelijkheid voor de moeilijkheden die onze klanten, zowel jong als oud, dagelijks meemaken.

www.carelife.nl



Mocht u vragen hebben, bel 0493-841853 of stuur een e-mail naar info@carelife.nl
Wij helpen u graag.

Wilt u de CareLife Traplift uitproberen? U bent van harte welkom in onze showroom om onze demolift uit te proberen!


Showroom:
CareLife Zorgcomfort
Vlierdenseweg 236
5756 PE Vlierden

CareLife Zorgcomfort, 400 m² zorgprodukten.

Draaistoel met vergrendeling

De CareLife Traplift draait, en kan in een positie worden vergrendeld, wat het op- en afstappen van de traplift gemakkelijk en veilig maakt. De traplift komt niet in beweging, tenzij de stoel in de juiste ritpositie is gezet.

Standaard is de CareLift Traplift voorzien van een veiligheidsgordel!

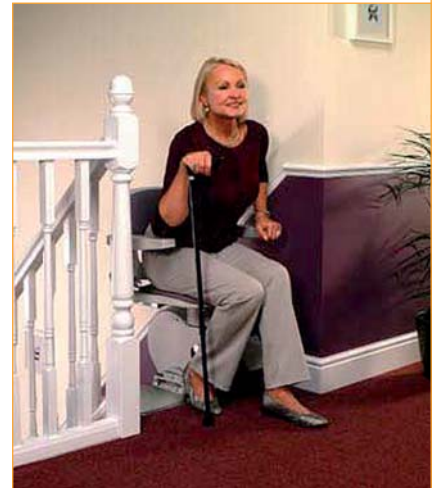

Veiligheid van onze traplift

Er zijn 5 oppervlaktes/randen, die de lift stoppen wanneer ze in aanraking komen met een obstakel op de trap. Deze zijn gesitueerd rondom de voetensteun en aan de boven- en onderkant van het onderstel.

Standaard is de CareLift Traplift voorzien van diverse veiligheidssensoren. Een veilig gevoel!



Meest geavanceerde lift

Het onderstel van de traplift is voorzien van een digitaal beeldscherm, dat aantoont wanneer de lift in de normale positie is. Ook levert het beeldscherm waardevolle diagnostische informatie wanneer een eventueel defect zich voordoet.

Hierdoor kunnen wij u snel helpen bij mogelijke problemen.



Veiligheidsgordels

Stoelliften kunnen uitgerust worden met een veiligheidsgordel of een extra veilig 3 punts schouderharnas.

Veiligheid boven alles!



De voordelen van onze gepatenteerde traplift

- Top kwaliteit geavanceerde traplift
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Comfort in huis
- Blijft werkzaam, zelfs bij stroomuitval, dankzij de ingebouwde accu
- Vloeiende start, vloeiende stop
- Vergrendelbare isolatieschakelaar
- Draaibare stoel
- Gemakkelijk schoon te maken
- Onderhoudsvrije batterijen
- Makkelijk te bedienen door een joystick
- Zowel te bedienen met uw linker- als rechterhand
- Infra rode afstandsbediening (2 stuks)
- Digitaal beeldscherm
- Opklapbare stoel en voetensteun voor vrije doorgang
- Veiligheid door sensoren
- Elektronische en mechanische remsystemen
- Bijna geruisloos in beweging
- Geschikt voor mensen tot 127 kg
- Laag energieverbruik
- Duidelijke Nederlandse handleiding
- Uitgebreide voorlichting
- Snelle en schone montage
- Snelle levering!




De afstandsbediening


CareLife Trapliften worden bediend door, óf een mechanische 'joystick' gemonteerd op de armsteun, óf door middel van een infrarood afstandsbediening, die alle twee geleverd worden bij de traplift. De mechanische bediening is sterker dan de afstandsbediening.

De afstandsbedieningen zijn ideaal als er twee gebruikers in het huis wonen, zodat de lift kan worden gezonden of gehaald. Het draadloze design betekent dat er geen lastige kabelverbindingen of besturingsstations nodig zijn.

Standaard worden er gratis twee afstandsbedieningen meegeleverd!

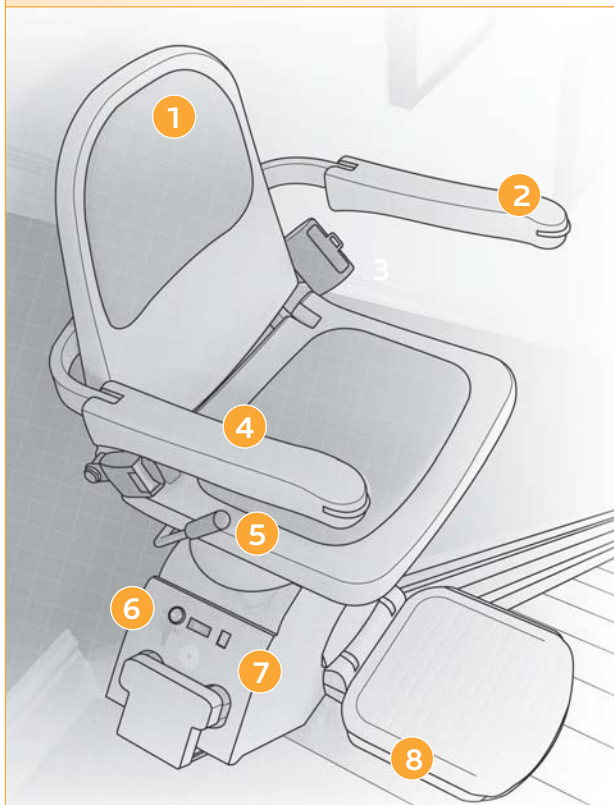

- 1 Beklede stoel.
- 2 Makkelijk te gebruiken besturing.
- 3 Stevige veiligheidsriem.
- 4 Door opvouwbare armsteunen, voetensteun en zitting, een makkelijke toegang tot de trap.
- 5 Draaibare stoel- het is niet nodig het lichaam te draaien om de lift op of af te gaan.
- 6 Vergrendelbare aan/uit schakelaar voorkomt gebruik door anderen (bijv. kinderen).
- 7 Diagnostisch digitaal display informeert de gebruiker over de status van de lift.
- 8 Vijf veiligheidssensoren op de voetensteun en het onderstel stoppen de lift automatisch, wanneer ze in aanraking komen met een obstakel.
- 9 Handmatige afstandsbedieningen maken het mogelijk voor de gebruiker de lift te 'halen' of te 'zenden'.

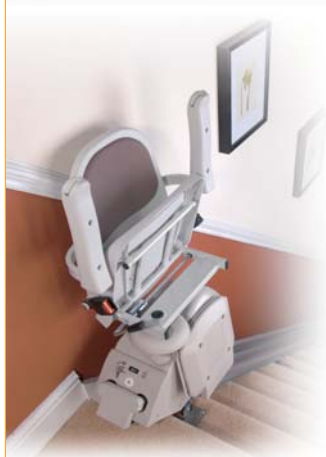


Specificaties

Motorkracht	0.25KW
Rijsnelheid	Niet hoger dan 0.15 m/s
Rijmethode	Heugel en tandwiel
Motordraaikoppel vermogen	108Nm
Energievoorziening	24V DC (batterijen)
Maximum capaciteit	127kg
Rail materiaal	Geëxtrudeerd aluminium
Netstroom voorziening	220V, 50Hz Oplader

Dimensies

	mm
A Breedte buitenkant armleuningen	560
B Breedte binnenkant armleuningen	445
C Breedte rugleuning	370
D Diepte van de stoel	410
E Bovenkant voetensteun tot stoel	445
F Vereiste ruimte onderaan de trap	660
G Breedte muur tot stoel	40
H Totale hoogte van de stoel	495
I Totale hoogte	1020
J Voetensteun oppervlakte tot vloer	115
K Gehele diepte (voetensteun opgevouwen)	325
L Gehele diepte (voetensteun uitgeklappt)	585

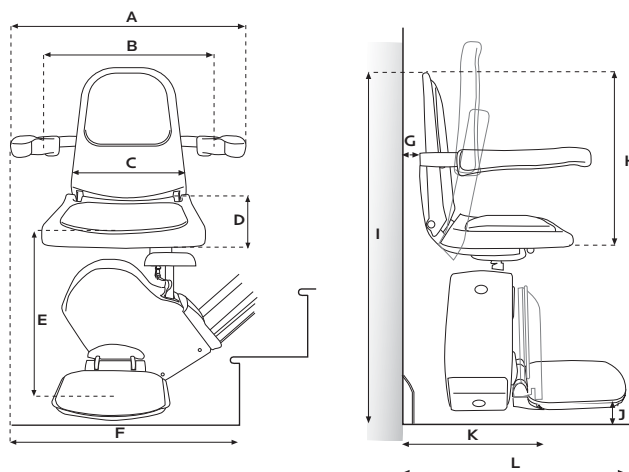

Ook verkrijgbaar

Perch traplift - ideaal voor gebruikers die moeite hebben met het buigen van de knieën. De lift is uitgerust met een steungreep voor extra veiligheid.

Zit/Staan traplift - dit model combineert de eigenschappen van de perch lift met de standaard lift, zodat gebruikers ervoor kunnen kiezen om te zitten of te staan.

Opklapbare rail - voor wanneer een standaard rail een obstakel veroorzaakt voor een deur aan de onderkant van de trap.

Buiten traplift - volledig weerbestendig voor buitenshuis gebruik.



Buitentraplift

CareLife Zorgcomfort



CareLife
Trapliften

Standaard wordt onze traplift zeer compleet geleverd.
Daarnaast zijn onze liften uit te voeren met extra opties:

Opklaprail

Het lagere gedeelte van de rail kan opgeklapt worden, wanneer het niet in gebruik is. Hierdoor wordt een betere toegang gecreëerd aan het voeteinde van de trap. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer er bijvoorbeeld aan het einde van de trap een deur is, waar een vaste rail in de weg zou zitten.

Opklaprail € 495,-



Staan beugel

Deze aanvulling maakt het de gebruiker(s) van de traplift mogelijk om te kiezen of ze de trap willen beklimmen/af dalen, zittend of staand op de voetensteun, terwijl ze zich vasthouden aan een stevige, veilige stang voor stabiliteit. Het zit en staan frame is ook ideaal wanneer er meerdere gebruikers zijn, met verschillende lichamelijke problemen en voor mensen die problemen hebben met het buigen van de knieën.

Staan beugel € 199,-



Neem een kijkje in onze showroom in Vlierden, Veenendaal of Antwerpen, of bezoek onze website!

CareLife.eu

Voor alle informatie over onze zorgproducten!

De grootste keuze in zorgcomfort!

Showroom Vlierden:

CareLife.nl

Vlierdenseweg 236

5756 PE Vlierden

T +31 (0)493-84 18 53

E info@SuperSauna.nl

Showroom Veenendaal:

CareLife.nl

Patrimoniumlaan 38

3904 AE Veenendaal

T +31 (0) 318-78 50 39

E info@SuperSauna.nl

Groot assortiment
zorgproducten in
de showrooms!



Toonzaal Antwerpen:

CareLife.be

Paardenmarkt 10

2000 Antwerpen

T +32 (0) 3227 0307

E info@SuperSauna.nl

